




Torre

150 Kg
Capacidade

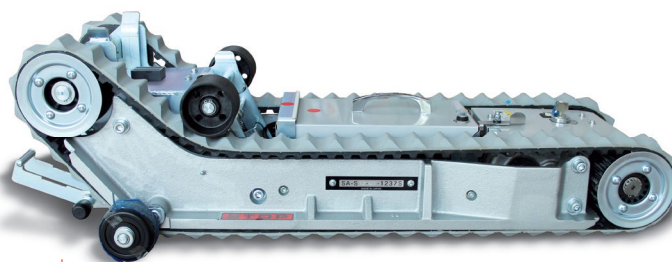

Unidade de tração

MODELO SA-S

Trepador de escadas SA-S

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Capacidade carga: 150 Kg.
Medidas comprimento/ largura/ altura: 1387mm x 644mm x 944mm
Peso sem carga: 59 Kg.
Motor: DC-E-Motor (estanque) 210 W / 30 min.
Bateria: 2 x 6 V / 20 Ah
Velocidade: escadas acima: 6,1m/min. / escadas abaixo 10,7m/min.
Ângulo máximo de inclinação: 35°
Sistema de travões: electromagnéticos
Indicador de carga de bateria: incluído
Carregador automático de bateria: 12V / 2,5 A

- Capacidade de carga de 150Kg aproximadamente até 30 pisos
- Raio de manobra nos patamares mais reduzido 970 x 970 mm
- Ângulo máximo inclinação 35°


DIMENSÕES MÍNIMAS DOS PATAMARES

Unidade (mm)


Escadas estreitas

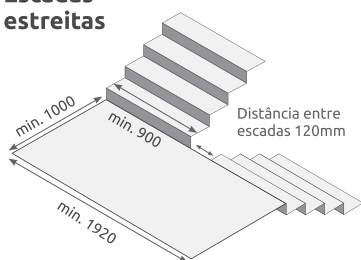

Escadas largas

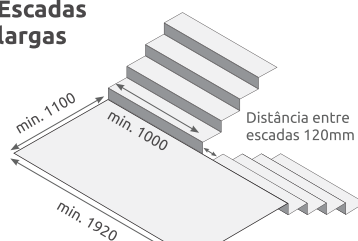

Escadas com ângulo de 90°

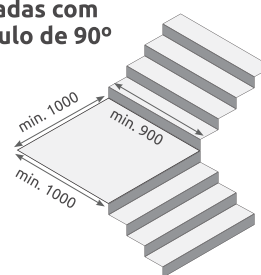

Em escadas estreitas como por exemplo de 900 mm, o trepador tem de realizar várias manobras no patamar intermédio para rodar e se posicionar.

LISBOA

R. Major João Luís de Moura, Famões Park,
Armazém W, 1685-253 Lisboa
T +351 219 349 490 (Chamada para a rede fixa nacional)

geral@well4alliberica.pt

well4alliberica.pt




Posição de arranque



Soltar a torre



Mova a cadeira de rodas sobre o trepador

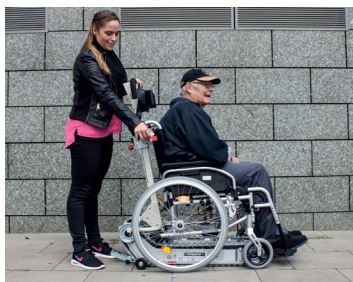

Acoplar a torre à cadeira de rodas de rodas



Colocar os cintos de segurança



Incline o passageiro juntamente com a cadeira de rodas até se ouvir o som do encaixe. Conduza de seguida o equipamento até as escadas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS



1 Display

2 Punhos ergonomicos

3 Lagartas aborrachadas de cor cinza, fiáveis e seguras




4 Baterias fáceis de substituir



5 Medidor de inclinação



7 Pedal desbloqueio da Torre

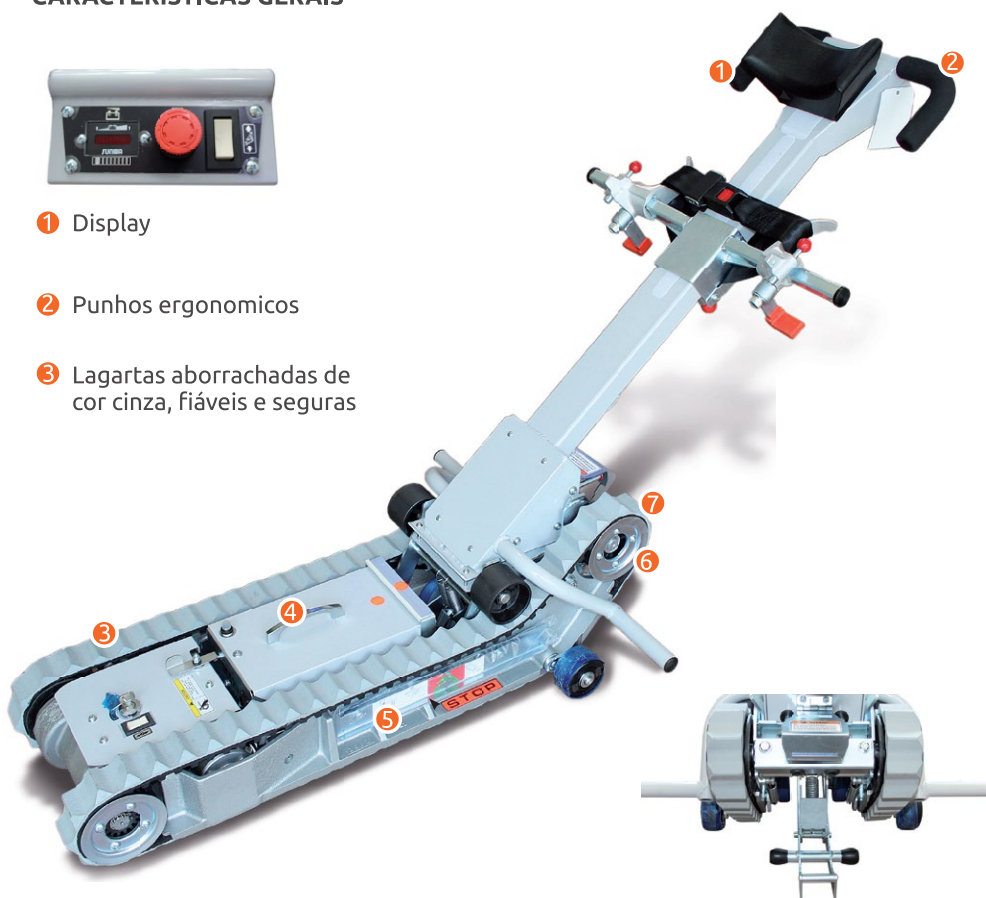

6 Pedal de inclinação

